Wydanie / Data: 2 / 11.2024

MD CE

Instrukcja używania

Oprawa okularowa do soczewek korekcyjnych

Opis wyrobu / Przewidziane zastosowanie
Oprawy okularowe do soczewek korekcyjnych (okularów korekcyjnych) stosowane są jako wyposażenie wyrobu medycznego. Swoją funkcjonalność uzyskują w połączeniu z soczewkami korekcyjnymi, które służą leczeniu wad układu wzrokowego człowieka, zapobiegają ich intensyfikacji i kompensują upośledzenie, jakim jest wada wzroku.

Przeciwwskazania:
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu.

Ostrzeżenia:



1. Nie należy używać wyrobu, jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zniekształceniu.
2. Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu.
3. W przypadku wystąpienia alergicznej wysypki skórnej, należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
4. Nie używaj dłużej niż 24 godziny w sposób ciągły

Przewidziany użytkownik
Wyposażenie wyrobu medycznego przeznaczone do stosowania przez użytkownika profesjonalnego. Oprawy okularowe po zamontowaniu soczewek korekcyjnych przez optyka nadają się do używania przez laika.

Grupy docelowe pacjentów
Pacjenci ze wskazaniami do stosowania okularów korekcyjnych.

Utylizacja wyrobu medycznego
Utylizację wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Konserwacja
Oprawy okularowe należy utrzymywać w czystości. Zaleca się czyścić używając miękkiej ściereczki bez użycia detergentów. Przy silnych zabrudzeniach przemyć delikatnie wodą, a następnie osuszyć. Oprawy okularowe wraz z soczewkami korekcyjnymi powinny być przechowywane w specjalistycznym etui. W celu zmniejszenia skutków naturalnego zużycia okularów zaleca się dokonywanie ich przeglądu i konserwacji w zakładzie optycznym.

Skład: Żywica (ULTEM), Octan celuluzy, Grilamid TR 90, Stal szlachetna (nierdzewna) (w zależności od modelu/wersji wykonania).




UWAGA
Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

Objaśnienie zastosowanych symboli

	**Producent**		**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu**
	**Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745**		**Wyrób medyczny**
	**Numer serii/partii**		**Zajrzyj do instrukcji używania**
	**Ostrzeżenie**		

Producent

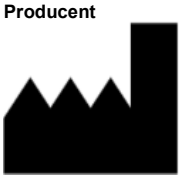

OPTIBLOK Sp. z o.o.
ul. Igańska 20/uż/3
04-087 Warszawa
www.belutti.com
tel. +48 22 870 23 31
info@optiblok.com